



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

**ÉPREUVE E3. UNITÉ U33****Biologie cellulaire et moléculaire et technologies d'analyses****Calculatrice interdite****LA LUTTE CONTRE LES VIRUS PATHOGÈNES DE LA VIGNE**

L'élaboration du vin, produit de consommation voué à l'exportation, fait l'objet de contrôles extrêmement rigoureux. Ils interviennent notamment pour :

- le choix des cépages cultivés,
- la lutte contre les agents phytopathogènes,
- la sélection des souches de microorganismes impliquées dans le processus de vinification.

Nous nous intéresserons aux infections virales de la vigne et aux techniques de lutte contre les virus impliqués.

**1 - Étude microscopique de la cellule végétale. (8 points)**

L'inoculation d'un virus dans une plante saine, qu'elle se fasse par voie directe ou par le biais d'un vecteur animal, nécessite toujours une blessure préalable de la paroi de la cellule végétale.

Le document 1 présente deux micrographies de cellule végétale.

1.1 - Nommer et exposer le principe de la technique microscopique ayant permis d'obtenir cette image (la préparation de l'échantillon n'est pas demandée).

1.2 - Légender le document 1.

**2 - Création de plantes génétiquement modifiées. (13 points)**

Les virus pathogènes de la vigne sont à l'origine de diminutions considérables de la quantité et de la qualité des récoltes. De plus, au contraire des champignons ou des bactéries, ils échappent à la lutte chimique.

Il est possible d'induire chez une espèce végétale, une résistance à un virus en introduisant dans le génome de la plante des gènes de ce virus.

Cette technique est une voie à l'étude pour la protection contre la maladie du court-noué de la vigne, due au grapevine fanleaf virus (GFLV), transmis à la plante par un ver nématode.

2.1 - Le GFLV appartient au genre *Nepovirus* de la famille des *Comoviridae*. Il s'agit d'une particule virale à symétrie icosaédrique, non enveloppée. Le génome est constitué de deux brins d'ARN(+) linéaires, chacun associé par leur extrémité 5' à une protéine VPg, intervenant dans le cycle de multiplication du virus.

2.1.1 - Que signifie l'expression ARN(+) ? Justifier la réponse.

2.1.2 - Réaliser un schéma légendé de la structure d'une particule de GFLV.

2.2 - Un gène codant une protéine structurale du virus a été isolé, puis inséré dans un plasmide de la bactérie *Agrobacterium tumefaciens*. Après co-culture de la bactérie en présence de cellules permettant la régénération de pieds de vigne entiers, il est possible d'obtenir des plantes transformées dont on teste ensuite la résistance au virus.

2.2.1 - Définir un plasmide. Expliquer pourquoi il constitue un bon vecteur de clonage.

2.2.2 - Détailler les étapes suivantes du clonage du gène viral :

- construction du plasmide recombinant,
- introduction du plasmide dans la bactérie,
- sélection des clones transformés.

**3 - Détection d'une infection d'un plant de vigne par le GFLV. (39 points)**

La détection d'une virose dans les plants de vigne est extrêmement importante en particulier lors de la sélection des cépages utilisés.

Deux méthodes peuvent être mises en œuvre :

- Test immunologique : ELISA.
- Test moléculaire : RT-PCR.

**3.1 - Test immunologique de détection du GFLV. (18 points)**

Les tests immunologiques de mise en évidence du GFLV nécessitent l'utilisation d'anticorps monoclonaux dirigés contre certains antigènes de surface du virus. Le **document 2** présente un protocole d'obtention des anticorps monoclonaux.

- 3.1.1** - Réaliser un schéma légendé de la structure d'un anticorps. Localiser et nommer le site de fixation de l'antigène.
- 3.1.2** - Quelles sont les caractéristiques des lymphocytes B et des cellules myélomateuses utilisées dans l'étape 2 du **document 2** ?
- 3.1.3** - Compléter le **document 2** et commenter l'étape 3 à l'aide des données du **document 3**.
- 3.1.4** - On utilise un test de détection ELISA de type sandwich.  
Schématiser les étapes du principe de cette méthode appliquée à la détection du GFLV dans un broyat de feuille de vigne, sans extraction complémentaire.


**3.2 - Test moléculaire de détection : RT-PCR. (17 points)**

- 3.2.1** - Donner la signification du sigle RT-PCR. Exposer le principe général de cette méthode.
- 3.2.2** - Le **document 4** représente le protocole de réalisation technique.
  - 3.2.2.1** - Expliquer le rôle des étapes 1, 2 et 3 en précisant notamment les actions respectives de l'EDTA et du SDS.
  - 3.2.2.2** - Préciser le rôle des hexamères introduits dans le milieu réactionnel lors de l'étape 9 du **document 4**.
- 3.2.3** - Pour détecter le GFLV dans un plant de vigne, on procède à l'amplification du gène codant la polymérase virale (position 4629-5345). La séquence partielle de ce gène est présentée dans le **document 5**.
  - 3.2.3.1** - Compléter le **document 5** en écrivant la séquence du brin d'ADN complémentaire.
  - 3.2.3.2** - Le choix du couple d'amorces est essentiel pour l'amplification. Le **document 6** propose deux couples d'amorces. Choisir celui permettant d'effectuer l'amplification de la séquence cible. Positionner chacune des amorces choisies sur le **document 5**.
- 3.2.4** - Schématiser le déroulement d'un cycle de PCR.

**3.3 - Comparaison des deux méthodes. (4 points)**

Donner les principaux avantages et inconvénients des deux méthodes utilisées.

**DOCUMENT 1 : MICROGRAPHIES DE CELLULE VÉGÉTALE**  
**(A : x 8000 et B : x 14000)**

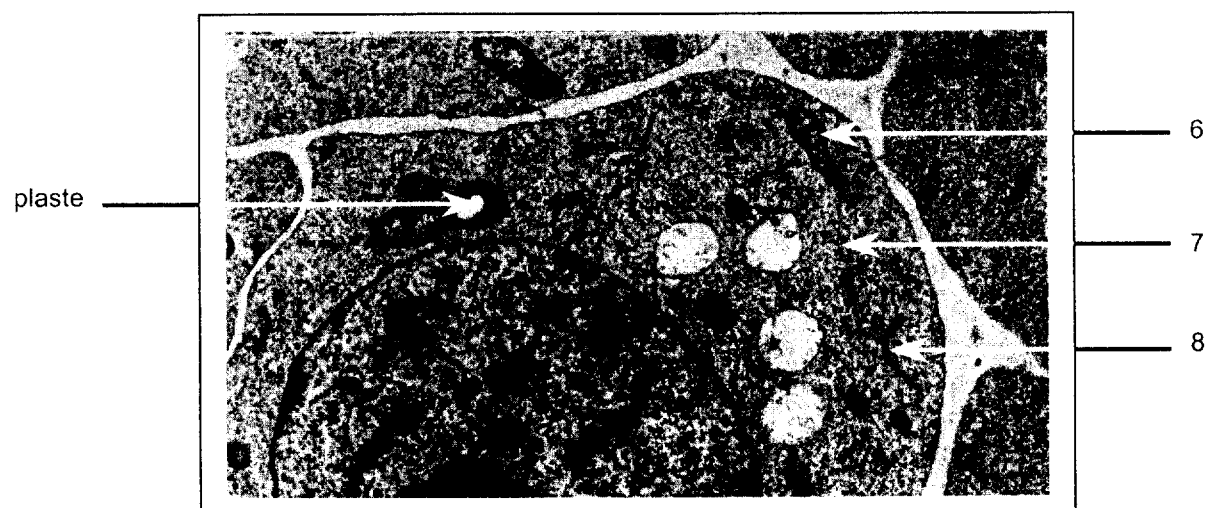

DANS CE CADRE

NE RIEN ÉCRIRE

Académie :

Session :

Examen ou Concours

Série\* :

Spécialité/option\* :

Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

NOM :

(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)

Prénoms :

N° du candidat

Né(e) le :

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)

\* Uniquement s'il s'agit d'un examen

Repère : BAE3BC

SESSION 2006


Durée : 2 H

Page : 4/7

Coefficient : 3

**A RENDRE AVEC LA COPIE****DOCUMENT 2 : PROTOCOLE D'OBTENTION  
D'ANTICORPS MONOCLONAUX**

Antigène viral

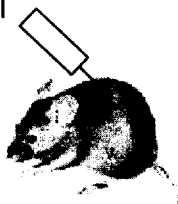

Etape 1 : \_\_\_\_\_

Rate

Lymphocytes B

Cellules myélomateuses


Etape 2 : \_\_\_\_\_

Etape 3 : Sélection en milieu HAT

Etapes 4 et 5 : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Etape 6 : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Anticorps monoclonaux  
Anti-GFLV

### DOCUMENT 3 : VOIES DE SYNTHÈSE DES NUCLÉOTIDES CHEZ LES MAMMIFÈRES

- Il existe deux voies de synthèse des nucléotides chez les mammifères :
  - la voie de synthèse *de novo*
  - la voie de récupération qui se met en place lorsque la voie *de novo* est bloquée.

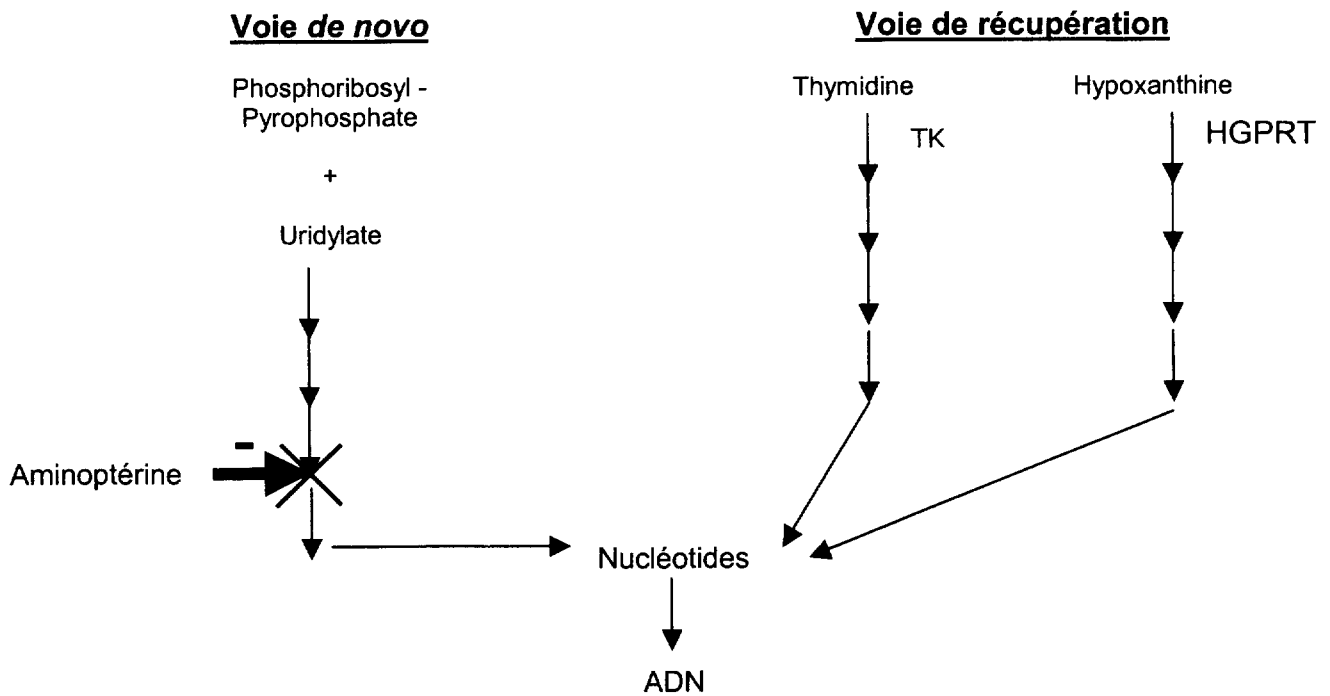

TK = Thymidine Kinase

HGPRT = Hypoxanthine Guanine Phosphoribosyl Transférase

- Milieu HAT** = Milieu contenant de l'hypoxanthine, de l'aminoptérine et de la thymidine

**DOCUMENT 4 : PROTOCOLE DE DÉTECTION DU GFLV PAR RT-PCR**

Echantillon : Feuille de vigne

**EXTRACTION DE L'ARN VIRAL**

**Étape 1 :** Broyage dans un mortier des feuilles congelées dans l'azote liquide

**Étape 2 :** Action d'un tampon d'extraction  
(Tris 100 mmol.L<sup>-1</sup>, LiCl 0,1 mol.L<sup>-1</sup>, EDTA 100 mmol.L<sup>-1</sup>,  
SDS 35 mmol.L<sup>-1</sup>, pH 8)

**Étape 3 :** Action d'un mélange phénol – chloroforme  
– alcool isoamylique (25-24-1)

**Étape 4 :** Précipitation par LiCl (2 mmol.L<sup>-1</sup>) (2 h à 4°C)

**Étape 5 :** Centrifugation (16000 g à 4°C)

**Étape 6 :** Lavage du culot par l'éthanol à 70 %

**Étape 7 :** Mise en suspension de l'ARN  
dans de l'eau déminéralisée stérile

**RT-PCR**

**Étape 8 :** Dénaturation de l'ARN (10 min à 65°C)

**Étape 9 :** Ajout au mélange réactionnel de la rétrotranscriptase (RT)  
et d'un mélange d'hexamères (45 min à 42°C).

**Étape 10 :** Ajout au mélange réactionnel de :

- Amorces à 1 μmol.L<sup>-1</sup>
- Taq polymérase à 0,05 U
- Tampon PCR 10X
- Mix de dNTP
- MgCl<sub>2</sub>
- Eau distillée

**Étape 11 :** 1 min à 92°C

**Étape 12 :** 1 min à 55°C

**Étape 13 :** 20 s à 72°C

**Étape 14 :** retour à l'étape 10 (34 fois)

**Étape 15 :** Détection des produits de PCR par électrophorèse  
sur gel d'agarose à 0,1 % de bromure d'éthyldium  
(20 min, 100 V)

DANS CE CADRE

NE RIEN ÉCRIRE

Académie :

Session :

Examen ou Concours

Série\* :

Spécialité/option\* :

Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

NOM :

*(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)*

Prénoms :

N° du candidat

Né(e) le :

*(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)*

\* Uniquement s'il s'agit d'un examen.

Repère : BAE3BC

SESSION 2006

Durée : 2 H

Page : 7/7

Coefficient : 3

**À RENDRE AVEC LA COPIE****DOCUMENT 5 : EXTRAIT DE LA SÉQUENCE DU GÈNE  
DE LA POLYMÉRASE DU GFLV**

4629



5345



5'---GTGCCATATGTACCAGAAGATGGG-----CGCCTACTGATGAAGAAGAGAGGC---3'

**DOCUMENT 6 : COUPLES D'AMORCES PROPOSÉS****A :** 5' GTGCCATATGTACCAGAA 3'

5' CTGATGAAGAAGAGAGGC 3'

**B :** 5' GTGCCATATGTACCAGAA 3'

5' GCCTCTCTTCTTCATCAG 3'

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.